

操作手册

【实验器材】

从左到右依次是读数显微镜、牛顿环、钠光灯、钠光灯电源。（如图 1）

【操作流程】

依照窗口右上角操作提示依次完成操作：

1. 点击钠光灯电源，点击开关打开钠光灯。
2. 点击反射镜，调整反射镜按钮，将反射镜调节至 45° 。
3. 点击牛顿环，将牛顿环放置在镜筒下方。
4. 点击目镜，进入刻度读数与数据记录窗口。（如图 2）
5. 点击窗口中的“调整目镜”按钮使十字叉丝清晰。
6. 点击窗口中的“物镜调整”按钮使图像清晰。
7. 点击窗口中的“居中”按钮使十字叉丝对准牛顿环。
8. 点击窗口中的“左 40 级”按钮，向左移动四十级，点击“5 级→”按钮向右移动 5 级，依次读数并填写表格。
9. 点击窗口中的“保存到本地文件”按钮将实验数据保存到本地

【标尺使用方式】

在界面中有上下两个标尺,分别是横向标尺与手轮标尺在横向标尺中每一格表示 1mm,在手轮标尺中每一格代表 0.01mm,将两个标尺数据相加即可得出当前数值，如需直接显示读数可勾选“显示读数”复选框。



图 1

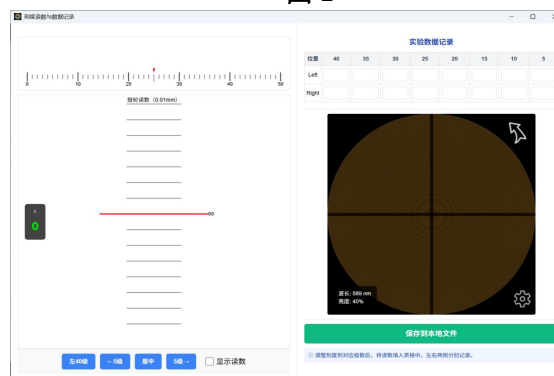


图 2